

Edelstahlhalter

Verarbeitungshinweise

Beschreibung: Halter aus Edelstahl (WStNr. 1.4305 / AISI 303) mit gerader und abgewinkelter Halterung.


Indikation/

Kontraindikation: Zur sicheren Anwendung der CA® Stripping Tools ohne EVA Handstück. Geeignet außerdem für alle Instrumente mit Schaftdurchmesser von 2,35 mm.

Unverträglichkeiten: Enthält Nickel; kann bei sensibilisierten Personen Allergien auslösen.

Achtung: Um einen sicheren Halt der verwendeten Instrumente im Edelstahlhalter zu gewährleisten, sollte die Überwurfmutter ggf. mit einer geeigneten Zange nachgezogen werden.

Nur für die oben genannte Indikation und durch qualifiziertes Fachpersonal zu verwenden. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!

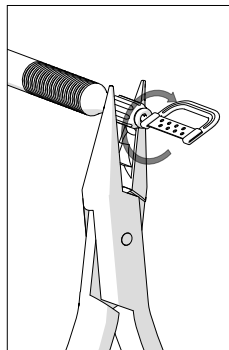

Sterilisierbar

REF 5358



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

SCHEU

SCHEUGROUP

DE/GB 500/05/22 G REF PM0253.01

